



Многолетний опыт клинического успеха

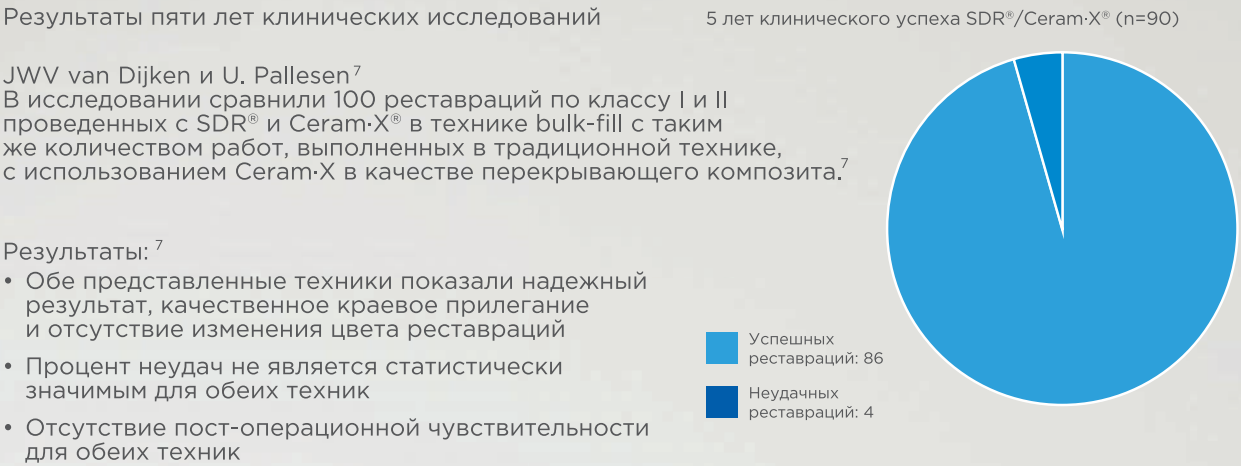

«Результаты исследования выявили, что bulk-fill техника одномоментного внесения материала слоем 4 мм более долговечная и надежная по сравнению с традиционной техникой внесения 2 мм, при небольшом статистическом перевесе»⁷

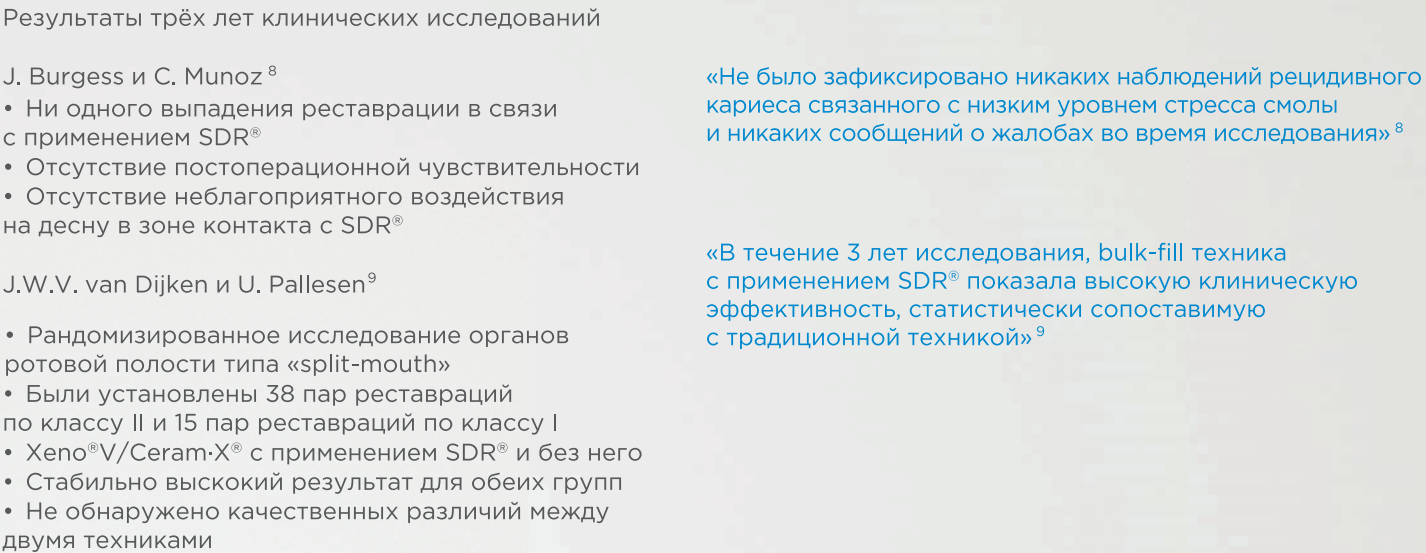

⁷ van Dijken JWV, Pallesen U. 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.

⁸ Внутренние данные доступны по запросу

⁹ A randomized controlled three year evaluation of “bulk-filled” posterior resin restorations based on stress decreasing resin technology (van Dijken JWV, Pallesen U, Dent Mater 2014; 30(9):e245-51.

Используйте SDR® вместе с матричной системой Palodent®V3 и nano-керамическим материалом Ceram·X®duo+

Palodent® V3

Матричная система



Ceram·X®duo+

Универсальный nano-керамический композит




- Предсказуемый плотный контакт
- Качественное краевое прилегание
- Меньше нависающих краев – меньше времени на финишную обработку
- Простая в использовании система

- Два уровня прозрачности
- 17 оттенков покрывают всю шкалу VITA®
- Натуральная эстетика
- Оптимальная биосовместимость: низкое выделение мономеров

«Комбинация матричной системы Palodent®V3 и материала SDR® обеспечивает простую, быструю и надежную реставрацию по классу II. Вряд ли вы найдете способ лучше»

Др. Рейс, Университет Гуарульос, Бразилия

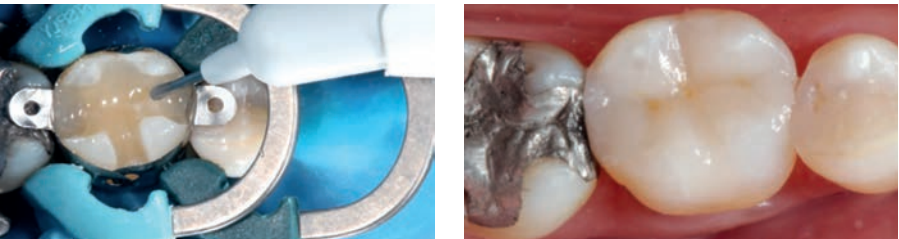

Информация для заказа

Стартовый набор SDR® Intro Kit	60603000	 ¹ VITA® не является зарегистрированной маркой Dentsply Sirona
45 компьюл (по 0,25 г каждая), 1 адгезив Xeno®V+ (2,5 мл), 1 палетка CliXdish™, 1 пистолет для компьюл Compules® Tip Gun, 1 коробка		
Набор SDR® Refill	60603002	
15 компьюл (по 0,25 г каждая)		
Набор SDR® Eco Refill	60603003	
50 компьюл (по 0,25 г каждая)		
3-шприцовый набор SDR®	60603005	
(1г. каждый, 20 аппликаторов)		
10-шприцовый набор SDR®	60603011	
(1г. каждый, 60 аппликаторов)		
Аппликаторы SDR®	60603007	
(60 аппликаторов)		

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



SDR®
Базовый текучий композит
объемного внесения

Непревзойденный
материал*



* По количеству наград Reality Awards, полученных в номинации «Лучший композит объемного внесения».

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



SDR® – Рациональный Заменитель Дентина

Техника внесения SDR — просто, быстро и эффективно

Экономия времени до 40% по сравнению с традиционной техникой



Свойства самовыравнивания и превосходная адаптация в полости


Текучая консистенция SDR® обеспечивает превосходную самоадаптацию в полости



Полимеризационный стресс до 60% ниже

Уникальный и запатентованный состав SDR® — ключ к контролируемой полимеризации. Для помощи мономерам в формировании более «расслабленной» сети в состав был включен модулятор. Это позволяет компенсировать эффект уменьшения объема при полимеризации и приводит к уменьшению полимеризационного напряжения. Поэтому SDR® можно вносить порциями толщиной до 4 мм, избегая трудоемкой и более длительной техники послойного внесения.

Полимеризационный стресс: материал SDR® по отношению к конкурентам²

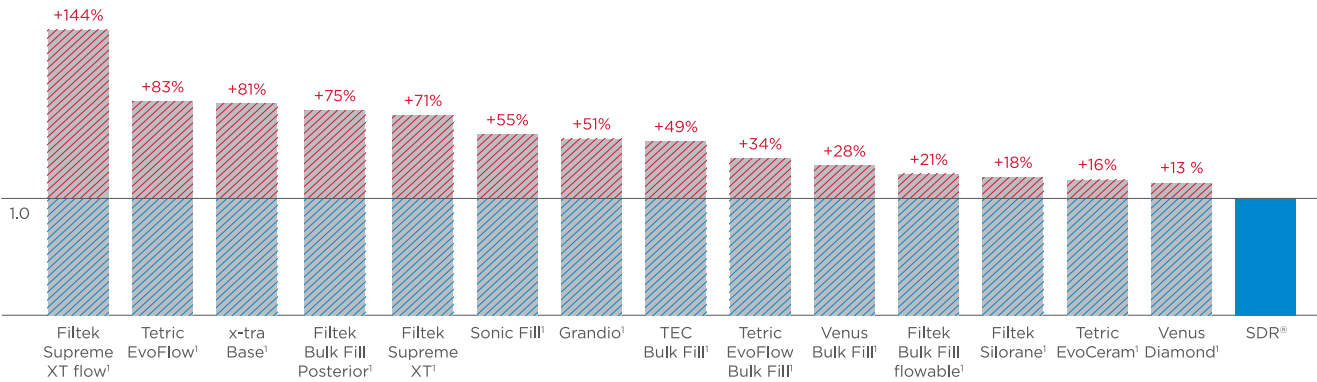


SDR® химически совместим со всеми композитами и адгезивами на основе метакрилатов

¹ Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.
² Внутренние данные доступны по запросу.

Идеальный реставрационный материал...

... для использования в качестве прокладочного материала и метода bulk-fill в полостях I и II класса

- Внесение слоем до 4 мм
- Идеальная адаптация к полости
- Не требуется традиционный прокладочный материал — простая процедура

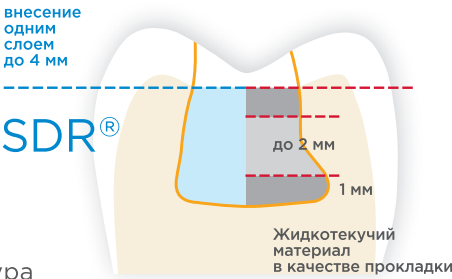

... для пост-эндодонтического восстановления

Отличная адгезия к дентину в полостях с высоким С-фактором

- Не зафиксировано неудач предварительного этапа тестирования материала во время исследования
- Надежная адгезия


«Для сокращения риска дебондинга при объемном внесении материала в полость с высоким С-фактором особенно важным фактором становится обоснованный выбор композитного материала»³

«Прочность сцепления на микроотрыв при заполнении 4мм полости объемным слоем значительно снижалась, однако материал SDR® стабильно сохранял силу бондинга»⁴


Van Ende / Van Meerbeek BIOMAT, KU Leuven (University of Leuven)

Качественное запечатывание устьев корневых каналов обеспечивает:


- Отсутствие подтекания внутрь корневых каналов
- Повышение успеха эндодонтического лечения

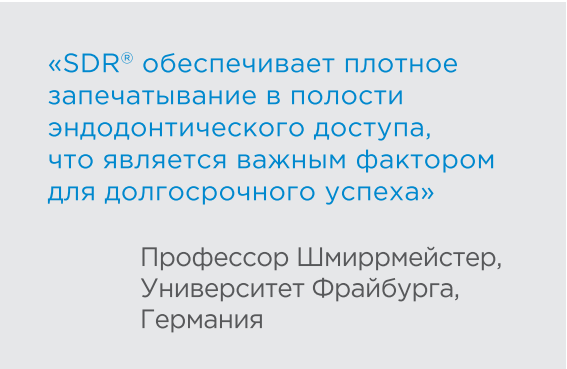

Процент неудач предварительного этапа тестирования материала на адгезию к стенкам полости⁴

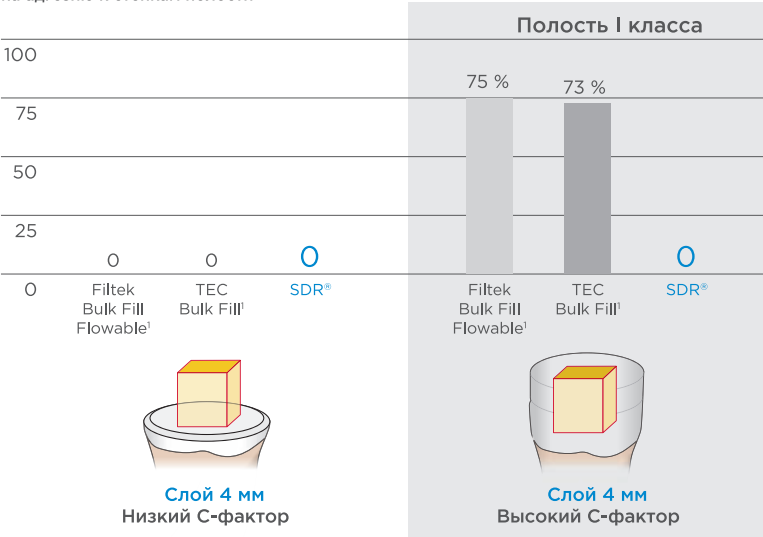

Относительное число [%] случаев, проявивших утечку в систему корневых каналов⁵

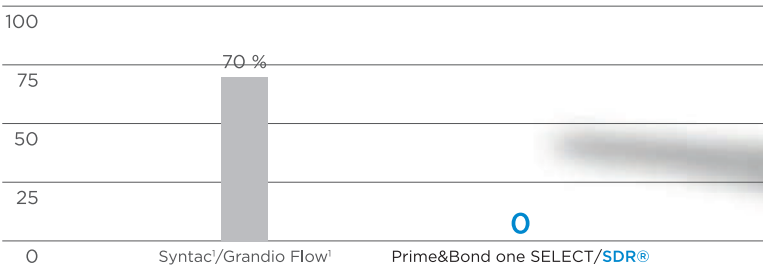


После obturation гуттаперчей | Идеальное самовыравнивание материала SDR® | Конечный результат с использованием нано-керамического композита Ceram-X® duo+ в качестве перекрывающего материала

¹ Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.
² Bulk-Filling of high C-Factor posterior cavities: Effect on adhesion to cavity-bottom dentin (Van Ende et al. Dental Materials 29 (2013): 269-277)
³ Van Ende A et al., 2016: Effect of Bulk-filling on the Bonding Efficacy in Occlusal Class I Cavities. J Adhes Dent.;18(2):119-24
⁵ Внутренние данные доступны по запросу

... для реставрации молочных зубов

Просто, быстро и надёжно

- Вносится слоем до окклюзионной поверхности, не требуется перекрывающий слой
- Универсальный полупрозрачный оттенок хорошо сочетается с молочным прикусом
- Быстрая и легкая техника внесения, идеально подходит для детей

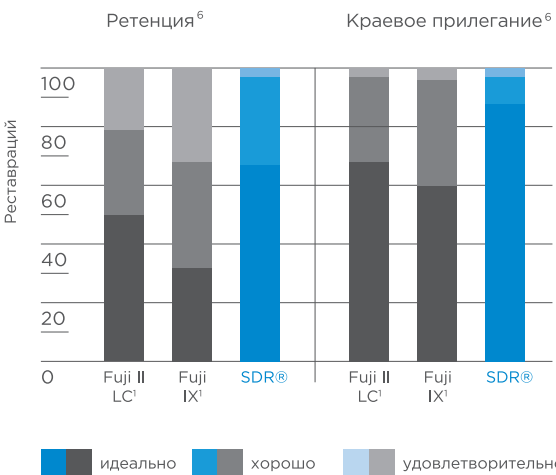

«SDR® экономит время пациента — огромное преимущество, особенно когда дело доходит до лечения детей»

Др. Вики Элерс, Майнцский Университет, Германия




SDR® Молочный зуб спустя 2 года после реставрации (75 зуб) | SDR® Молочный зуб спустя 1,5 года после реставрации (65 зуб)

... для герметизации фиссур и надстройки культи

- Легко заполняет фиссуры
- Точное внесение благодаря тонкому носу компьюлы
- Быстрая процедура
- 4 мм одной порцией



Собственность Dentsply Sirona

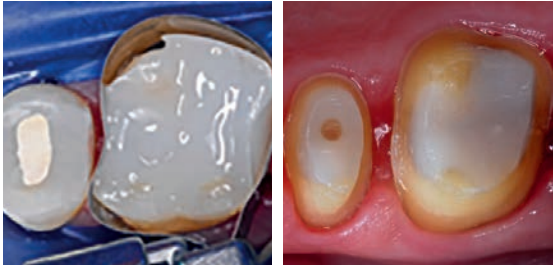

Dr. van der Vyver

¹ Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.
⁶ Clinical evaluation of restorative materials for primary teeth (Jasiński P, Sobiech P, Korporowicz E, Gozdowski D, Olczak-Kowalczyk D, European Academy of Pediatric Dentistry, Strasbourg, 2012, OPD 185)